

## PROTOCOL VOOR DE CERVEX-BRUSH BIJ DE ThinPrep® PAP TEST

### ZET ALLES KLAAR VOOR U DE PROCEDURE BEGINT


- Controleer de uiterste gebruiksdatum op het potje. Gebruik geen potje waarvan de uiterste gebruiksdatum is verstreken.
- Controleer of de hele plastic verzegeling van het dopje van het potje is verwijderd en is weggegooid.
- Vul alle patiëntgegevens in op zowel het aanvraagformulier als op het potje. Monsters kunnen eventueel worden teruggestuurd als de gegevens op het potje ontbreken.
- Verwijder het dopje van het potje voordat u het uitstrijkje afneemt.
- Als bevochtiging van het speculum nodig is, mag een beetje warm water of een kleine hoeveelheid wateroplosbaar glijmiddel zoals KY Jelly gebruikt worden. Het is belangrijk dat wordt voorkomen dat de cervix in aanraking komt met het glijmiddel, omdat het monster daardoor onbetrouwbaar kan zijn. Zorg ervoor dat het uiteinde van het speculum niet met het glijmiddel in aanraking komt.



#### NOTEER...


...de volledige naam en geboortedatum van de patiënt op het potje.

...informatie over en medische geschiedenis van de patiënt op het aanvraagformulier voor cytologie.

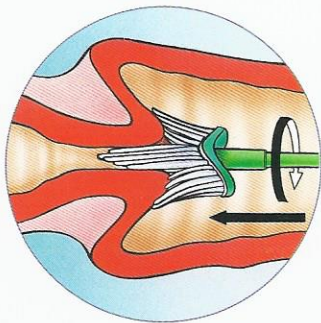

#### NEEM...

...voldoende materiaal uit de baarmoederhals met een Cervex-brush (groen of blauw bezemachtig voorwerp). Plaats de middelste borstelhaartjes diep genoeg in het baarmoederhalskanaal, zodat de kortere borstelhaartjes volledig contact maken met de baarmoedermond. Zet rustig druk en draai de borstel vijf keer rond met de klok mee.

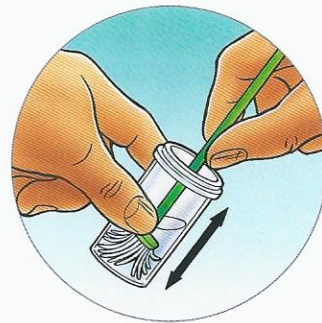


#### SPOEL...

...de Cervex-brush meteen uit in het potje met PreservCyt oplossing door hem 10 keer op de bodem van het potje te drukken waardoor de borstelhaartjes uit elkaar komen te staan. Draai de borstel ten slotte krachtig rond zodat er meer materiaal vrijkomt. Controleer de Cervex-brush met het oog om er zeker van te zijn dat er geen resten zijn achtergebleven. Gooi het borsteltje weg. Laat de kop van de Cervex-brush niet achter in het potje.



#### DRAAI...

...het dopje er zodanig op dat de zwarte markering op het dopje op de zwarte markering van het potje komt te staan. Niet te strak dichtdraaien.

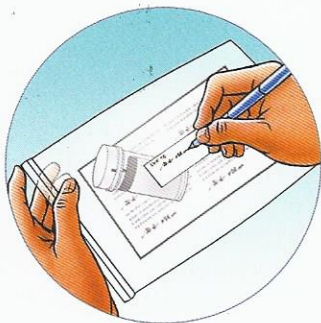

#### DOE..

...het potje en het aanvraagformulier in het daarvoor bestemde verpakkingsmateriaal voor verzending naar het laboratorium.

THE  
**ThinPrep**<sup>®</sup>  
PAP TEST

De nieuwe generatie  
cervixuitstrijkjes